

medicine[®]

ReMed+

The smart Pillbox like never before




अनुक्रमणिका

1. इस बॉक्स में क्या है?	2
2. इस उत्पादन की विशेषताएं	3
3. आपके ReMed+ के बारे में जानकारी	4
4. तुरंत शुरुआत	6
5. ReMed+ सेटअप	
5.1 आपके डिवाइस की रूपरेखा को जानिए	7
5.2 आपकी दवाएं शामिल किजिए	8
5.3 आप दवाई टाइम पर ले रहें हैं या नहीं की रिपोर्ट	10
5.4 आपके डिवाइस को रिसेट किजिए	11
6. सुरक्षा की जानकारी	13
7. वॉरंटी की जानकारी	14
8. उत्पादन की जानकारी	15
9. संपर्क जानकारी	16

1. आ बोकसमां शुं छे?

- ReMed+
- युअेसबी सी-टाइप केबल
- उपभोकता मार्गदर्शिका

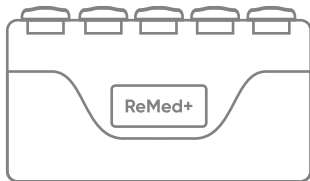

(2)

2. इस उत्पादन की विशेषताएं



दवाई कब लेनी है
उनके लिए अलार्मस



दवाई ले रहे है की
नहीं उनका रिपोर्ट



सूझ
रिमाइन्डर्स



WiFi
सुविधा



युअेसबी
सी-टाइप केबल




हरेक विभाग के लिए
अेलइडी लाईट




दस दिन की
बेटरी क्षमता

3. ReMed+ के बारे में जानकारी

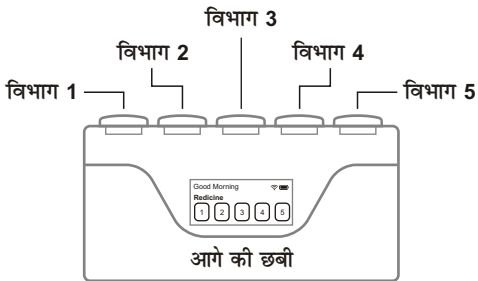

(4)


3. ReMed+ के बारे में जानकारी

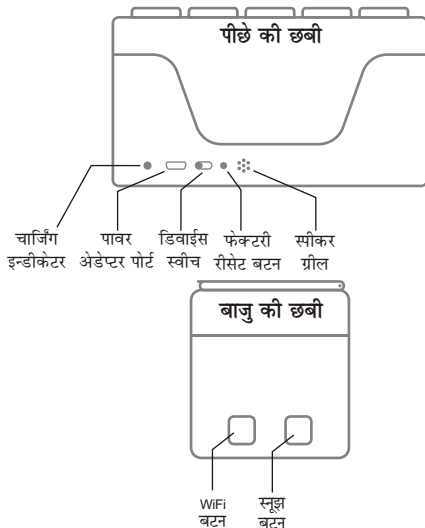

(5)

४. तुरंत शिथिल

4. तुरंत शुरुआत

- डिवाइस ऑन करने के लिए स्लाइड स्वीच को दाएं से बाएं तरफ किजिए।
- पांच सेकन्ड के बाद आप डिस्पले पर होम स्क्रीन देख सकते हैं।
- WiFi का बटन शुरू करने से आप स्क्रीन पर WiFi  आइकन देख पाएंगे।
- आपके डिवाइस को WiFi के साथ जोड़कर "REMEDIATION" के साथ कनेक्ट करें।
- बारकोड स्कैन करने के बाद आपका डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। अब आप रेडिसिन एप डाउनलोड करके आपकी दवाइयों का टार्गेट टेबल बना सकते हैं।

5. ReMed+ सेटअप

5.1 डिवाइस की रूपरेखा को जानिए।

- WiFi की मदद से आपके डिवाइस को आपके फोन के साथ कनेक्ट करें।
- रेडिसिन एप शुरू करने के बाद "WiFi" के साथ कनेक्ट करते ही आपका फोन कनेक्टेड डिवाइस में दिखने लगेगा।
- कनेक्टेड डिवाइस पर क्लिक करने से 'पिल बॉक्स सेटिंग्स' खुल जाएगा।
- "Name" पर क्लिक करने से आप डिवाइस का नाम बदल सकते हैं।
- (Max. 15 Characters)
- आप इस पेज पर बैटरी परसन्टेज भी देख सकते हैं।
- इस एप के द्वारा आप डिवाइस का अलार्म वॉल्यूम भी ON/OFF कर सकते हैं।
- आप दवाई खाने का अलार्म स्नूज़ भूती कर सकते हैं। वह आपको दवाई लेने के लिए फिर से याद करवाएगा।

5.2 आपकी दवाएं एड किजिए

- उै-खै की मदद से आपके डिवाइस को आपके फोन के साथ कनेक्ट करें।
- रेडिसिन एप ओपन कारके + पर क्लिक करें।
- आपकी सारी दवाईयों की सूचनाएं इसमें एड किजिए।
- आपकी जरूरत की मेडिसिन्स के लिए कम्पार्टमेंट सिलेक्ट किजिए और उसमें दवाई एड किजिए।
- How often do you take? इस ओप्शन के द्वारा आप कौनसी दवाई कितने समय के अंतर पर लेते है उसका ओप्शन सिलेक्ट किजिए।

- अगर कोई दवाई हररोज खाते है तो उसके लिए "Everyday" का ओप्शन सिलेक्ट करें।
- अगर कोई दवाई आप हप्ते के कुछ ही दिन खाते है तो उसके लिए "Selected Days" का ओप्शन सिलेक्ट करें।

(8)



5.2 आपकी दवाएं एड किजिए

- अगअ आपको दवाई कुछ दिनों के अंतर में खानी है तो "Days Interval" का ओप्शन सिलेक्ट करें। जैसे की कोई दवाई आपको हर तीन दिन के अंतर में खानी है तो "Days Interval" का ओप्शन सिलेक्ट करके स्लाइड में से तीन ओप्शन सिलेक्ट करने होंगे।

- **How many times a day**


अगर कोई दवाई आपको दिन में तीन बार खानी है तो इस ओप्शन को सिलेक्ट करें और डॉक्टर के सुजाये हुए डोज और दवाई लेने का समय एड कर दिजिए।

- **स्मार्ट लाइट विन्डो:** यह एक युनिक अलार्म सिस्टम है। यह इस बात का ख्याल रखना है की आप कभी भी दवाई खाना भूले नहीं। और आपकी हर दवाई का रेकॉर्ड भी यह फिचर रखता है।

5.3 आप दवाई टाइम पर ले रहे हैं या नहीं की रिपोर्ट

- इस रिपोर्ट से आप जन सकते हैं की ट्रीटमेन्ट ठीक से चल रही है या नहीं और पेशान्ट टाइम से दवाई ले रहा है या नहीं। यह रिपोर्ट डॉक्टर को भी हेल्पफुल रहती है।
- इस रिपोर्ट को जनने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फोलो किजिए।

- अपने फोन को WiFi के साथ कनेक्ट किजिए।
- Redicine एप में से रिपोर्ट ओपन किजिए।
- Sync Now ओप्शन पर क्लिक करने से आपकी रिपोर्ट आपके फोन के स्क्रीन पर आ जाएगी।

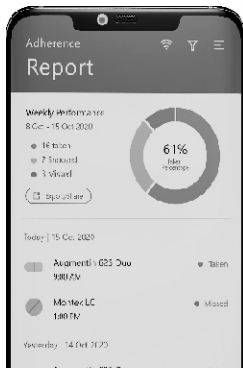

(10)

5.4 बैटरी पावर की जानकारी

- एक बार डिवाइस चार्ज करने से आपका ReMed+ डिवाइस दस दिन तक चल सकता है। आप बैटरी का सिम्बोल (🔋) हर वक्त आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। (बैटरी लाईफ आपके उपयोग पर आधारित है।)
- अगर बैटरी सिम्बोल पर डिस्चार्ज (🔋) का सिम्बोल दिख रहा है तो तुरंत आपके डिवाइस को चार्ज करने के लिए रख दिजिए। जैसे ही आप डिवाइस को चार्ज के लिए रखेंगे तब चार्जिंग की लाल लाईट शुरू हो जाएगी। और डिस्ले पर चार्जिंग का सिम्बोल (🔌) दिखने लगेगा।
- जब डिवाइस चार्ज हो जाएगा तब चार्जिंग लाईट ग्रीन हो जाएगी।

5.5 स्नूज़ बटन

- एक बार स्नूज़ बटन प्रेस करने के बाद वह आपको दस मिनट के बाद या फिर आपके द्वारा सेट किये हुए समय के बाद आपको दवाई लेने के लिए रिमाइंडर देगा।
- इस सुविधा का उपयोग आप दूसरे कम्पार्टमेंट में रखी हुई दवाई लेने के लिए भी कर सकते हैं। दूसरे कम्पार्टमेंट में रखी दवाई लेने के लिए स्नूज़ बटन को पांच सेकन्ड तक प्रेस करें।

5.6 डिवाइस रीसेट

- अगर आप पुरानी सारी इन्फर्मेशन डिलीट करके डिवाइस रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट ओप्शन आपकी मदद करेगा। रीसेट की तीस सेकंट तक प्रेस करने से पहले की सब इन्फर्मेशन डिलीट हो जाएगी। और आप दूसरे पेशन्ट की इन्फर्मेशन एड कर सकते हैं।

6. आपकी सुरक्षा की जानकारी

- यह मार्गदर्शिका ध्यान से पढ़िए और सारे सूचन और चैतावनी अच्छे से फोलो किजिए।
- इस डिवाइस को पानी और हरद तरह के लिक्विड से दूर रखिए।
- इस डिवाइस को गरम चीजों से दूर रखिए।
- अगर बोकस खोलते वकन डिवाइस तूटा हुआ या फिर डेमेज्ड दिखें तो इसका उपयोग ना करें।
- ड्राइविंग करते वकत या और कोई डिवाइस युज करते वकत इस डिवाइस का उपयोग ना करें।
- बच्चों और पालतु जानवरों से इस डिवाइस को दूर रखें।
- अगर डिवाइस में कुछ प्रोब्लेम दिखें तो उसे रिपैर करने की कोशिश ना करें। एसा करने से ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। और वारंटी का बैनिफिट भी आप खो सकते हैं।
- अगर आपको डिवाइस में कुछ समस्या दिख रही है तो तुरंत आपके हैल्थ केर प्रोवाइडर के साथ बात करें।
- इस डिवाइस के साथ दिए गए कैबल का ही चार्जिंग के लिए उपयोग करें।
- दवाई लेने का समय बदलने से पहले हेल्थ केर प्रोवाइडर के साथ बात करना अति आवश्यक है।

7. वारंटी के बारे में जानकारी

आपकी सुविधा के लिए यह मेडिसिन पिल बॉक्स एक साल की वारंटी के साथ आता है।

- ग्राहक को वारंटी की सभी जानकारी ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल आपके साथ रखना चाहिए ताकि वह वारंटी क्लेम करते वक्त आपको काम आ सके।
- अगर ग्राहक की लापरवाही से डिवाइस खराब होने पर वह वारंटी में शामिल नहीं होगा।
- यह उत्पाद और वारंटी के बारे में कोई भी जानकारी जानने के लिए आप कस्टमर सर्विस के साथ बात कर सकते हैं।
- वारंटी का लाभ सिर्फ मूल ग्राहक को ही मिल सकता है।
- वारंटी की शर्तों में बदलाव आने की संभावना है। वारंटी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारी वेबसाइट का उपयोग करें।

"वारंटी का दावा करने के लिए संपर्क करें support@redicinemedsol.com"

8. उत्पादन की जानकारी

- Wi-Fi नेटवर्क: 802.11 b/g/n
- पावर इनपुट: 5V1A (युएसबी सी-टाइप)
- डायमेंशन: 215mm x 113mm x 113mm (LxWxH)
- बैटरी: 3.7V 1800mAh (रिचार्जिबल)
- डिस्प्ले: इ-पेपर डिस्प्ले – 2.9 inch, 296x128 Pixel (DPI - 125)

9. संपर्क जानकारी

जयादा जानकारी के लिए हमारा संपर्क करें।

+91-9601071614

info@redicinemedsol.com

www.redicinemedsol.com

हम आशा करते हैं की आपका रेडिसिन के साथ सुखद अनुभव रहें।



रेडिसिन मोबाईल एप
डाउनलोड करने के लिए
इस बारकोड को स्केन करें।



युझर मेन्युअल अपनी
भाषामें प्राप्त करने के लिए
इस बारकोड को स्केन करें।

